

PRENSAS CORTA MUESTRAS DE PRECISION


Para cortar muestras rectangulares, cuadradas o circulares con gran precisión, +/- 0,1mm, para ensayos ó mediciones de *Tracción, gramaje, CMT, RCT, CCT...en Papel ó cartulinas ...(*)*

De acuerdo a normas: DIN – ISO – TAPPI –ASTM – UNE...

- ❑ Muy fácil de usar
- ❑ Rapidez y precisión de corte de muestras
- ❑ Pantalla de seguridad transparente (CE)
- ❑ Construcción robusta



Cod T-6798

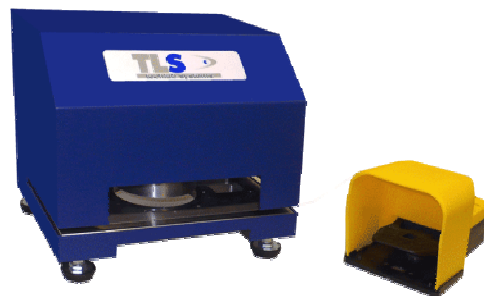

Cod. T- 3169 152,4 x 12,7 mm - Papel

Cod. T- 3170 100 ó 50 cm² - Papel

Cod. T- 3171 100 ó 50 cm² - **Papel Tissue**

Cod. T- 6798 200 x 200 mm - Papel

Cod. T- 6844 DIN A4 (210 x 297 mm) – Papel

Cod. T- 6844 LETTER 8,5 x 11 inches - Papel

Prensas neumáticas operadas por medio pedal, que incorporan pantalla acrílica protectora para tener seguridad durante el proceso de corte. Fabricadas con elementos de corte de precisión, lo cual asegura una gran precisión en las dimensiones de corte de las muestras. Las muestras cortadas, caen por gravedad a la zona inferior de la prensa. Opcionalmente con accionamiento por doble botonadura

* Prensas diseñadas para cortar principalmente muestras de PAPEL (Liner/Medium)...Para otros materiales, necesitamos las especificaciones o muestras



Cod T-6844

PRENSA equipada con pedal de accionamiento. Opcionalmente se puede suministrar con doble pulsador.
Luz de paso 500 mm

PESOS Y DIMENSIONES , ejemplo del code. T-6798:

Dimensiones: 240 x 260 x 360 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Embalaje: 430 x 550 x 610 mm (Ancho x Fondo x Alto)
Peso Neto/Bruto: 40 Kg / 62 Kg

CONTENIDO ENVIO:

> Prensa Cortaprobetas Neumática + Pedal

CONEXIONES

> Aire comprimido: 600 kPa