



Software **LYNX** de ensayos de Compresión CMT – RCT – CCT - ECT – FCT – PAT, también incorporable a los Sistemas de Gestión Integral **LYNX** Plus o Pro


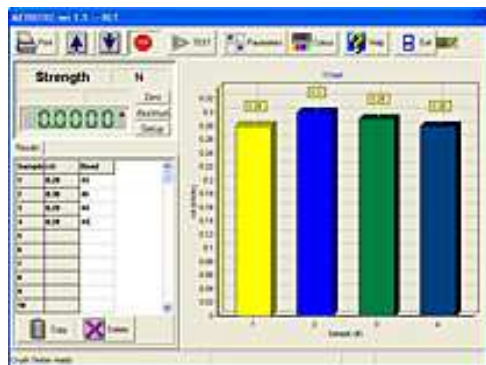


CMT

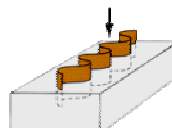


CCT

ECT

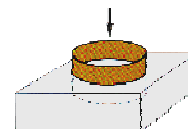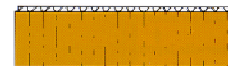

RCT

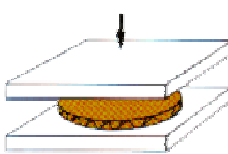

FCT



COMPRESOMETRO DE MUESTRAS



PAT



*“Datos en Tiempo Real...”*

Puede operar de forma Autónoma o Integrado con el Módulo de Gestión Básica **LYNX** (un solo equipo) o en el Sistema **LYNX** Plus ó Pro de gestión integral del laboratorio (varios equipos interconectados en Red Local)

- Rapidez en la ejecución de ensayos y obtención de resultados
- Sin errores humanos - Trazabilidad conforme ISO 9000

Por medio de este Software de Ensayos **LYNX** y utilizando un Compresómetro de muestras con sus correspondientes dispositivos, se pueden realizar ensayos de Compresión CMT – RCT – CCT - ECT – FCT – PAT en muestras de Papel Liner – Medium y Cartón Ondulado.

- Indicación de los Valores Máximo – Mínimo –Medio – Desviación Estándar
- Capacidad de almacenamiento hasta 100 ensayos por cada informe
- Funciones de SALVAR – IMPRIMIR y COPIAR AL PORTAPAPELES.

**OPCIONAL: Código T-6879 - MODULO DE GESTION LYNX con Estadísticas Básicas**

Permite realizar gestión de los datos, elección idiomas, generación de informes, librería de unidades, niveles de password, Introducción de valores mínimos, máximos y óptimos para explorar los datos con estadísticas, gráficas de Barras, Campanas de GAUSS, Comparativa de Tolerancias..., exportación datos a Word – Excel..., generación PDF...

