



**LYNX-View** es un software desarrollado por **TECLAB SYSTEMS**, que permite visualizar en pantalla los resultados de sus ensayos obtenidos o introducidos en las diferentes versiones de los **Sistemas LYNX** en forma de gráficas de tendencia marcando las tolerancias y que se controla de manera remota sin que las personas que los visualicen necesiten operar con el programa.

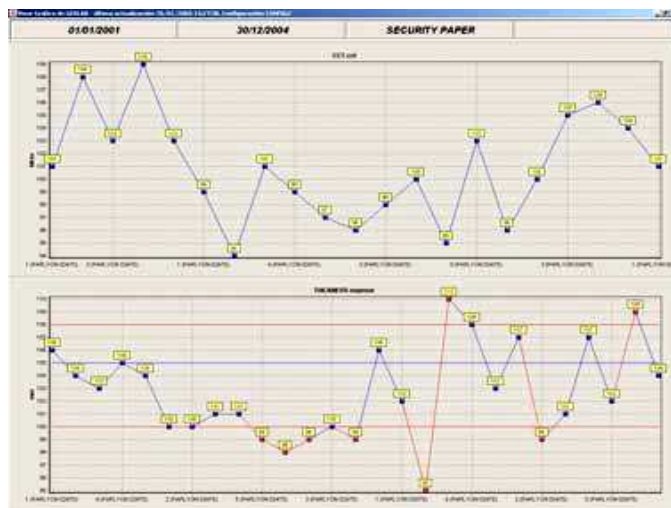

- **Visualización en producción** de los resultados de su fabricación en tiempo real de una manera sencilla, cómoda y atractiva
- **Información** para los diferentes responsables de área de la calidad obtenida.
- **Confianza de sus clientes.** Instalando **LYNX-View** para ser visualizado en una pantalla en su sala de visitas, mostrando la transparencia de su fabricación si así los desea.
- **Conseguir que sus trabajadores sean conscientes de la calidad.** Instalando **LYNX-View** en diferentes puntos de su empresa.

Es el responsable del laboratorio quien decide cuales son los resultados que se muestran en el puesto remoto, desde el interface de Geslab instalado en su laboratorio de control de calidad. **LYNX-View** se podría, de esta manera, instalar en cualquier otro ordenador de su fábrica conectado en red local con su laboratorio.

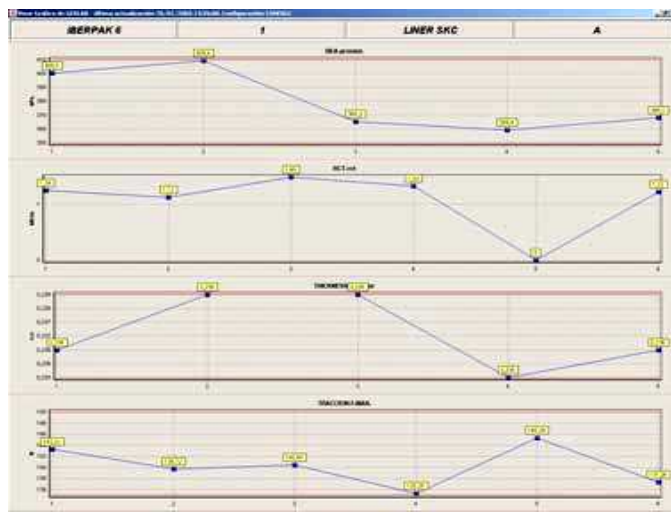

Las características de **LYNX-View** son las siguientes:

- Visualización hasta 10 gráficas simultáneamente con los resultados de sus diferentes ensayos
- Selección de los resultados a ver de dos formas diferentes:
  - ✓ Por pedido (orden de fabricación) e informe (lote de ensayos)
  - ✓ Por tipo de material, fecha de ensayos y/o máquina que lo fabrica
- Posibilidad de crear y guardar infinitas configuraciones de visualización
- Posibilidad de visualizar intermitentemente todas las configuraciones que necesite, controlando el tiempo que permanecerá en pantalla cada una de ellas.
- Control del intervalo de refresco de sus resultados
- Visualización gráfica de las diferentes tolerancias de sus ensayos para cada uno de los materiales
- Visualización en un color diferente, de los resultados que están dentro y fuera de sus tolerancias
- Información en su laboratorio de si **LYNX-View** está activo o no
- Posibilidad de tener diferentes visores por toda su fábrica, visualizando información diferente en cada uno de ellos si así lo desea.

