


ESTUFAS DE PRECISION

Estufas universales de precisión para acondicionamiento, desecación, envejecimiento de muestras..., en el laboratorio. **Serie MMUF** - de Circulación de Aire Forzada



Estufas Basic

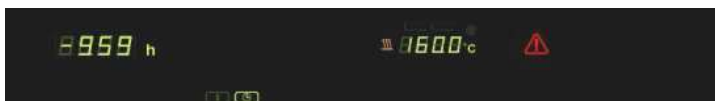

Tecnología básica, a precio moderado para calentamientos estándar una sola temperatura nominal.
Reloj de desconexión digital de 99 hrs., 59 min.

Protección de sobre-temperaturas doble. Entrada Aire fresco precalentado ajustable mediante regleta

- Interior en acero inoxidable 1.4301
- 1 bandeja perforada (hasta mod. 400) y 2 Bandejas perforadas (modelos 400 a 800)
- Carcasa: Acero inoxidable texturizado - parte trasera en acero galvanizado
- Puerta de acero inoxidable totalmente aislada, a partir mod. 600, (2 puertas)
- Ventilación: Mezcla de aire fresco precalentado con control de ventilación por escala, mariposas de restricción en tubo de aireación
- Conexión eléctrica: clavija Alemana (valido en España)
- Termostato de seguridad de sobre-temperatura ajustable (TWW- DIN 12.880)
-

MODELOS	400	500	600	700	800
Volumen litros	53	108	256	416	748
Anchura interior (mm)	400	560	800	1040	1040
Altura interior (mm)	400	480	640	800	1200
Fondo Interior (mm)	330	400	500	500	600
Estantes incluidos/ máximo	2 / 4	2 / 5	2 / 7	2 / 9	2 / 14
Ancho exterior (mm)	550	710	950	1190	1190
Altura exterior (mm)	680	760	920	1080	1605
Fondo exterior (mm)	480	550	650	650	750
Carga eléctrica (W) (Durante el calentamiento)	1400	2000	2400	4000	4800
C. eléctrica 50/60 Hz (V)	230	230	230	400 F+N	400 F+N
Peso Neto (Kg)	35	50	87	121	164
Peso Bruto (Kg)	42	63	107	139	224
Embalaje - Ancho (mm)	670	820	1100	1340	1320
Embalaje - Alto (mm)	780	970	1140	1310	1840
Embalaje - Fondo (mm)	630	670	840	850	910